



Corpoderm

Healthcare & Beauty

www.corpoderm.com



6 rue de Soyouz - 31240 L'Union - France
+33 (0)5 62 89 16 76
contact@corpoderm.com

partenaire
des
spécialistes
des soins
esthétiques
depuis
2006



4
|

Si **Corpoderm** bénéficie aujourd'hui d'une véritable reconnaissance dans le milieu du soin esthétique, c'est sans nul doute grâce à la vision de son fondateur José Flotats : ne pas chercher à «vendre pour vendre», mais construire sur la durée une relation de confiance avec sa clientèle.

5
|

le spécialiste des appareils esthétiques professionnels

Implantée à proximité de Toulouse, la société **Corpoderm** développe depuis 2006 une offre de produits et services destinée aux professionnels de l'esthétique.

Corpoderm est une entreprise familiale. Notre stabilité est intimement liée à celle de notre clientèle. Pour garantir notre pérennité, nous sélectionnons avec exigence les technologies les plus innovantes, et concevons avec rigueur nos équipements esthétiques professionnels.

À la fois concepteur et distributeur d'appareils esthétiques professionnels, **Corpoderm** déploie toute son expertise pour proposer aux professionnels de l'esthétique un accompagnement sur le long terme, un partenariat gagnant/gagnant englobant plusieurs facettes du métier avec pour maîtres-mots la pérennité et la stabilité de votre entreprise.

l'innovation comme moteur, la pérennité pour objectif

Notre première mission consiste à repérer les technologies innovantes et à identifier les plus performantes.

Dans un second temps, nous travaillons en collaboration avec nos ingénieurs spécialistes pour perfectionner ces technologies : au-delà des critères évidents d'efficacité, nous portons une attention particulière à la fiabilité des solutions techniques et à leur sécurité d'utilisation.

Avant de distribuer nos équipements, nous nous assurons également de la conformité du cadre légal et menons une étude de marché afin de valider la pertinence de notre offre.

Ainsi, nous sommes en mesure de garantir aux professionnels de l'esthétique une exploitation à long terme, et sans risque, de nos équipements.

la proximité client et la qualité de service

À travers ce partenariat gagnant/gagnant, les équipes **Corpoderm** ont développé une véritable proximité avec les professionnels de la beauté.

Cette proximité est un véritable atout puisqu'elle nous permet de saisir avec rapidité et précision les évolutions et les défis auxquels se confronte en permanence le secteur du soin esthétique.

Pour y répondre, nos équipes et nos partenaires travaillent ensemble au perfectionnement des technologies et des appareils de soin. Mais bien d'autres facteurs entrent en compte pour assurer le succès d'une offre de soins et **Corpoderm** a peu à peu identifié l'ensemble des leviers à activer pour y parvenir.

Formation aux technologies, accompagnement financier, facilitateur de solutions d'assurance, sécurisation de l'activité, communication...

Corpoderm est aujourd'hui en mesure de proposer une offre de service complète qui se veut également évolutive de façon à pouvoir accueillir le meilleur des nouvelles technologies.

des clientes parlent de **Corpoderm**



Derma studio
1 avis

★★★★★ il y a 3 mois

Une société avec du personnel au top. Entreprise familiale qui prend vraiment en compte nos contraintes et notre personnalité. Facilité d'échange avec eux et surtout merci à François mon commercial qui a toujours été disponible pour mes questions et qui m'a toujours accompagnés lors des diverses étapes. Le personnel sont de bons conseils et ne force pas à l'achat. Je remercie également les formatrices, notamment Emmanuelle avec j'ai fait presque toutes mes formations. Une personne qui a su me mettre en confiance face aux nouvelles connaissances et compétences à acquérir et qui est dans l'encouragement permanente.

Merci à toute l'équipe! Et heureuse de cette collaboration!! 😊



TARAS INSTITUT
1 avis

★★★★★ il y a un mois

C'est une marque très fiable , appareils facile à manipuler et sécurité que j'utilise pour l'épilation définitive, équipe formidable à l'écoute et service après vente actif , je recommande cette marque !



LASERA CENTRE ESTHETIQUE
10 avis

★★★★★ il y a 10 mois

Je ne peux que souligner le professionnalisme et le côté humain de cette société. Toute l'équipe est très à l'écoute, que ce soit au siège ou dans l'aspect commercial. Les machines sont toutes de dernière technologie et les formations sont excellentes. Je vous remercie pour notre collaboration. Je recommande fortement.



Celine ferrer
9 avis - 7 photos

★★★★★ il y a 8 mois

Juste exceptionnel
Professionnelle de la beauté je suis ravie d'être partenaire corpoderm
Que ce soit Pauline pour la communication, Vero la formation, magali ma partenaire commerciale je suis ravie de cette nouvelle équipe qui m'accompagne
Je viens de recevoir une superbe affiche personnalisé pour mon institut en plus de tout le reste
Un grand merci!
Je recommande cette marque et surtout cette grande humanité

Si **Corpoderm** est une entreprise française, nos partenariats se développent bien au-delà de l'hexagone, tant en termes de conception que de distribution.

une entreprise en mouvement en France et à l'international

Le siège social de **Corpoderm** se situe à l'Union dans la périphérie de Toulouse. Nos commerciaux et formateurs se déplacent dans toute la France, directement dans votre établissement et/ou dans les locaux de nos partenaires. Pour toujours plus de proximité avec notre clientèle, nous avons implanté des showrooms et centres de formation dans plusieurs villes de France, notamment à Paris, Chartres, Marseille, Bordeaux, Amiens, Lyon, Nice, Nantes et Freyding-Merlebach. Mais aussi à l'international, en Belgique et aux Etats-Unis. Enfin, nous sommes présents sur la plupart des salons et événements liés au secteur de l'esthétique.

Pour repérer les technologies les plus pertinentes, les équipes **Corpoderm** mènent une veille active à l'international et développent de véritables collaborations avec les ingénieurs et leurs unités de fabrication. Notre objectif : perfectionner les technologies et concevoir des appareils esthétiques professionnels optimisés pour équiper les instituts esthétiques, centres minceur et autres établissements dédiés à la beauté et au soin.

les collaborations internationales

Nous travaillons toujours dans le respect des normes européennes en vigueur, avec un niveau d'exigence élevé quant à la qualité des équipements.

Les premières technologies **Corpoderm** ont été développées en Espagne avec un fabricant renommé spécialisé dans les lasers médicaux. D'autres collaborations internationales ont ensuite vu le jour, notamment en Asie et en Belgique pour la Diadermie. Misant sur l'excellence française, **Corpoderm** poursuit ses recherches et développe une gamme complète d'appareils de photobiomodulation fabriqués en France dans la région toulousaine au plus près de son siège social.

L'expertise **Corpoderm** bénéficie également d'une reconnaissance internationale et les équipements **Corpoderm** sont déjà distribués dans plusieurs pays d'Europe, dans la plupart des pays du Maghreb ainsi qu'aux USA où ils sont commercialisés soit en direct, soit dans le cadre de partenariats de distribution exclusive.

Les partenaires du secteur professionnel de la beauté

Corpoderm travaille également en partenariat avec les acteurs incontournables du monde de la beauté tels que les organisations syndicales CNEP (Confédération Nationale de l'Esthétique et de la Parfumerie), CNAIB (Confédération Nationale Artisanale des Instituts de Beauté et SPA), les sociétés de financement et les assureurs spécialisés.

Nous assurons la mise en relation de nos clients avec ces différents organismes, et nous les encourageons à rejoindre une organisation syndicale pour défendre leurs intérêts et bénéficier d'une information en temps réel sur leur domaine d'activité.

nos gammes d'appareils



minceur



anti-âge



beauté



diagnostic



concept

Nos appareils sont réservés à un **usage professionnel**. Seules les personnes titulaires d'un **diplôme esthétique ou para-médical** sont habilitées à les utiliser. La distribution des appareils s'accompagne d'une **formation** à la technologie utilisée ainsi qu'aux spécificités de chaque équipement. La **parfaite maîtrise des technologies** par les praticiens équipés et la **qualité de conception** des dispositifs de soin à visée esthétique garantissent la réputation des appareils distribués par **Corpoderm**.



Leaseir

laser diode

Photo-dépilation :

épilation durable par une technique dépilatoire indolore, sans risque et donc applicable sur la plupart des zones corporelles.



actions :

- Destruction des follicules pileux par photo-thermolysé sélective.
- 100% des poils sont durablement éliminés pour plusieurs années.

séance :

- Traitement de 4 à 8 séances*, espacées de 60 jours pour la photo-dépilation.

matériel :

- équipement **Leaseir** avec 1 pièce à main photo-dépilation (au choix)
- consommable indispensable pour les premières séances de laser

les + :

- 40% plus rapide qu'un laser traditionnel
- 80% plus rapide qu'un IPL traditionnel
- phototypes I à VI
- traitement plus confortable
- couverture parfaite de la zone traitée
- sécurité absolue
- économe en consommables, longévité des barres Diode
- rentabilité optimale
- certification CE médical

* moyenne constatée

Leaseir
plus rapide
plus rentable

caractéristiques techniques

| fabriqué en Espagne

Ergonomie	Sur roulette
Nombre de pièces à main	1
Longueur d'onde	810 nm ou 810/940/1060
Fluence	10 à 60 J/cm ²
Surface de traitement	0,81cm ² / 1,75cm ² / 2,1cm ² / 3,7 cm ²
Vitesse de tir maxi	10 Hz
Fréquence de tirs	1 à 10 Hz
Durée de pulse	1 à 400 ms
Refroidissement	Générateur + liquide de refroidissement laser
Température du spot	Maintien à 0°
Puissance générateur	5000W
Puissance pièce à main	2000W / 4000W / 6000W
Poids	50.5kg
Dimensions	45cm (L) x 57cm (P) x 110cm (H)
Mode balayage	Oui



Lasera

laser diode

Photo-dépilation :

épilation durable par une technique dépilatoire indolore, sans risque et donc applicable sur la plupart des zones corporelles.



actions :

- Destruction des follicules pileux par photo-thermolyse sélective.
- 100% des poils sont durablement éliminés pour plusieurs années.

séance :

- Traitement de 4 à 8 séances*, espacées de 60 jours pour la photo-dépilation.

* moyenne constatée

matériel :

- équipement **Lasera** avec 1 pièce à main photo-dépilation (au choix)
- consommable indispensable pour les premières séances de laser

les + :

- 20% plus rapide qu'un laser traditionnel
- 40% plus rapide qu'un IPL traditionnel
- phototypes I à VI
- traitement plus confortable
- couverture parfaite de la zone traitée
- sécurité absolue
- économique en consommables, longévité des barres Diode
- rentabilité optimale
- certification CE médical

caractéristiques techniques

| fabriqué en Asie

Ergonomie	Sur roulette
Nombre de pièces à main	1 ou 2
Longueur d'onde	808 nm ou 755/808/1064 nm
Surface de traitement	4,0 cm ²
Vitesse de tir maxi	20 Hz
nombre de tir	50 à 100 millions
Durée de pulse	5 à 100 ms
Refroidissement	Air + Eau réfrigérée (ventilateur intégré à la pièce à main)
Puissance générateur	4000 W
Puissance pièce à main	2400 W
Fluence	10 à 80 j/cm ²
Poids	55 kg
Dimensions	480 mm x 470 mm x 1045mm
Mode balayage	Oui

Lasera
 efficacité
 confort & rentabilité



Stella[®]

lumière pulsée
SHR On Move

Photo-dépilation :

épilation durable par une technique dépilatoire indolore, sans risque et donc applicable sur la plupart des zones corporelles

Photoraajeunissement :

soins anti-âge (rides, ridules, fermeté), harmonisant (texture et grain de la peau), réparateur (correction des imperfections cutanés).



actions :

- Destruction des follicules pileux par photo-thermolysé sélective, stimulation de la production de collagène et d'élastine pour un effet remodelant et raffermissant.
- Photo-dépilation : 90% des poils sont durablement éliminés pour plusieurs années.
- Photorajeunissement : résultats visibles dès la première séance et durables sur plusieurs mois.

séance :

- Photo-dépilation : traitement de 6 à 8 séances, espacées de 15 à 45 jours.
- Photorajeunissement : traitement de 6 séances de 40 minutes chacune.

matériel :

- équipement **Stella** avec 2 pièces à main photo-dépilation et photorajeunissement
- consommable indispensable pour les premières séances de lumière pulsée

les + :

- rapide : 40% plus rapide qu'un IPL traditionnel
- traitement plus confortable
- couverture parfaite de la zone traitée
- sécurité absolue
- économique en consommables, longévité lampe Xénon
- rentabilité optimale
- certification CE médical

caractéristiques techniques		fabriqué en Asie
Ergonomie	Sur roulette	
Nombre de pièces à main	2	
Longueur d'onde	455 - 1200 nm ; 690 - 1200 nm	
Fluence	1 - 50 J/cm ²	
Surface de traitement	8 x 40 mm ; 15 x 50 mm ; 20 x 50 mm	
Vitesse de tir maxi	6 - 10 Hz	
Durée de pulse	2 - 15 ms	
Pause de pulse	5 - 60 ms	
Refroidissement	Air, eau réfrigérée et semi-conducteur peltier	
Température à froid	Jusqu'à -4°	
Capacité du réservoir d'eau	4.5 L	
Puissance générateur	2000W	
Poids	45kg	
Dimensions	118 cm x 49 cm x 56 cm	
Mode balayage	Oui	

Stella[©]

la référence IPL
des experts



EsthéLyse

Electrolyse,
thermolyse & Blend

Complément indispensable aux technologies IPL et Laser, pour traiter 100% des demandes en épilation définitive.

Efficacité accrue : poil blanc, poil résiduel, repousse paradoxale et poils hormonaux.

EsthéLyse
Pour une épilation
vraiment définitive



technologie :

- Electrolyse méthode d'épilation définitive qui détruit le follicule pileux grâce à un courant électrique.
- Thermolyse méthode d'épilation définitive qui détruit le follicule pileux par la chaleur générée par un courant haute fréquence.
- Méthode Blend méthode d'épilation définitive combinant électrolyse et thermolyse pour détruire le follicule pileux.

actions :

- Destruction du follicule pileux par une action chimique via un courant continu (électrolyse), par un courant haute fréquence (thermolyse).

matériel :

- équipement **EsthéLyse** avec écran tactile.
- consommable indispensable pour les premières séances, filaments en acier inoxydable, filaments recouverts d'or.
- lunettes loupe.
- chronomètre
- crème réparatrice et solaire
- guéridon
- lampe loupe
- pince à épiler.

les + :

- traite tous les types de poils et tous les phototypes
- 100% des poils traités sont définitivement éliminés
- sécurité totale
- rentabilité des séances
- combine 3 modes de travail – réduction du ressenti client
- précision et durabilité des résultats

caractéristiques techniques		fabriqué à Prague
Modes	électrolyse, thermolyse, blend	
Fréquence (mode thermolyse)	13.56 MHz	
Mode d'application	manuel, automatique	
Paramètres d'alimentation	220 – 240 V / 50 Hz	
Consommation d'énergie	17W (ou moins)	
Dimensions	315 mm x 315 mm x 167 mm	
Poids	4.7kg	



MelanColor

mesure l'indice
de mélanine

MelanColor est un outil de référence notamment en dermatologie clinique, permettant de définir le phototype.



actions :

- **MelanColor** calcule automatique l'ITA, l'indice de classification de la peau permettant de définir le phototype.

séance :

- **MelanColor** est généralement utilisé en amont d'une séance de lumière pulsée ou de laser.

matériel :

- **MelanColor** fournit avec 2 piles

les + :

- précision : détermine le phototype de la peau
- rapidité : calcul automatique de l'ITA en quelques secondes
- fiabilité : les mesures ne sont pas impactées par la lumière ambiante
- mobilité : portable et alimenté sur pile

caractéristiques techniques

| fabriqué en Finlande

Dimensions	198 x 40 x 35 mm
Poids avec piles	145g
Piles interchangeables	AA
Temps de mesure	1.5 secondes
Surface de peau illuminée	0.3cm ²
Source d'éclairage	3 LED blanches

MelanColor

Simple et
indispensable



Esthe-Skin

Soin nettoyant
en profondeur



Esthe-Skin

Multi technologie

Technologies de nettoyage de la peau en profondeur.
Réalise des protocoles personnalisables pour une
amélioration globale de la texture et du teint de la peau,
favoriser l'hydratation ou traiter les imperfections.



technologie :

- hydradermabrasion
- radiofréquence
- micro-courants
- ultrasons
- ozone
- marteau froid
- jet à haute pression

actions :

- nettoyage des pores de la peau
- exfoliation des peaux mortes
- traitement des points noirs
- régénération du collagène
- augmente la pénétration des principes actifs

séance :

- séance personnalisable environ 45min.
- 6 séances pour un traitement intensif.

matériel :

- équipement **Esthe-Skin** avec pack de démarrage de produits *mesoestetic*®

les + :

- les meilleures technologies en soin du visage en 1 appareil
- des protocoles de soins spécifiques associant les cosmétiques *mesoestetic*® pour des soins de la peau personnalisés et ciblés.
- compatible avec tous les produits de la marque *mesoestetic*®

caractéristiques techniques

| fabriqué en Asie

Tablette d'utilisation	18 x 28 cm
------------------------	------------

Nombre de pièces à main	7
-------------------------	---

Bac de diffusion	3
------------------	---

Bac de récupération	1
---------------------	---

Ecran	Tactile
-------	---------

applications :

- anti-âge
- hydratation & resserrement des pores
- raffermissement cutané
- tonification de la peau
- réduction des vergetures
- prévention de la chute des cheveux
- relaxation
- préparation et récupération pour sportifs

séance :

- Traitement en 4 à 8 séances espacées de quelques jours.
- Une séance dure de 8 à 20 minutes.

matériel :

- équipement **EsthéLED** fabriqué en France avec interface ergonomique et système modulable pour s'adapter à la zone traitée
- lunettes de protection oculaire

les + :

- appareil professionnel mains libres
- 8 couleurs émises en simultané & en synergie
- 39 protocoles enregistrés
- méthode naturelle et non invasive
- soins sans consommable
- utilisable pour les soins visages & corps avec une innocuité totale
- résultats visibles et durables

caractéristiques techniques

| fabriqué en France

Ergonomie

Sur roulette

Nombre de panneaux

3

Surface d'illumination

1000cm²

Nombre de LEDs

480

puissance générateur

600 W

Densité de puissance

125 mW/cm² à 10cm

Fluence

156 joules

Nombre de couleurs

8

Longueur d'onde

400 à 855 nm

Poids

40kg

Dimensions

130 x 50 x 40 cm

EsthéLED

des caractéristiques
uniques et inégalées

actions :

- stimulation du métabolisme cellulaire
- stimulation du métabolisme cutané
- stimulation des processus lipolytiques et du drainage dans le tissu adipeux
- amélioration de la pénétration des actifs cosmétiques

séance :

- traitement intensif visage en 6 séances
- traitement intensif corps en 10 séances

matériel :

- équipement **Genesis** avec pack de démarrage de produits *mesoestetic*®

les + :

- technologie all in one
- résultats prouvés par des études cliniques
- compatible avec tous les produits de la marque *mesoestetic*®
- traitement visage et corps
- combinaison de 4 technologies en 1
- plus de 40 programmes préétablis et enregistrés + programme libre
- certification CE médical


caractéristiques techniques

| fabriqué en Espagne

Puissance	180 W
Normes	CE esthétique – ISO 14971
Fréquence	448 kHz
Ecran	Ecran RGB tactile
Pièce à main	3 applicateurs radiofréquence + 1 applicateur de transport cutanée + set d'électrodes + plaque de retour
Dimensions (sans meuble)	37L x 44P x 115H cm
Poids	35 kg
Ergonomie	Meuble smart base sur roulettes + plateau porte-applicateurs
Mise à jour logiciel	Via USB
Pack démarrage	produits <i>mesoestetic</i> ®

Genesis®

Au service de votre peau

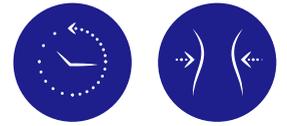

Diasculpt

La diadermie,
une exclusivité
mondiale !

Diasculpt

diadermie

Soins anti-âge et amincissement visage et corps.

La combinaison d'infrarouges courts et d'air pulsé est une technique développée en exclusivité par **Corpoderm**.

L'infrarouge court (IRA) réchauffe les couches sous dermiques de la peau alors que l'épiderme conserve une température à 37° grâce au refroidissement continu de l'air pulsé.



actions :

- Les infrarouges courts, alliance de chaleur et de lumière rouge, pénètrent en profondeur les tissus dermiques. Ils enclenchent un phénomène de photo bio-stimulation qui densifie les tissus et diminue la masse grasseuse instantanément.
- Résultats immédiats, durables et visibles dès la première séance, tant pour les soins minceur que pour les soins anti-âge.
- Augmentation de la densité des fibres de collagène et d'élastine, la peau est raffermie.
- Oxygénation des tissus, teint unifié et éclatant.
- Diminution instantanée de la masse grasseuse, ligne amincie.

séance :

- Une cure nécessite en moyenne 5 à 10 séances de soin pouvant être programmées 2 fois par semaine.
- Chaque séance dure entre 45 min et 1h.

matériel :

- équipement **diasculpt**
- 2 pièces à main (visage & corps)
- 4 embouts pour la pièce à main visage
- 2 embouts corps

les + :

- une technologie esthétique innovante et performante, 100% naturelle et non-invasive
- un appareil anti-âge et minceur efficace et innovant
- soins rapides et confortables
- sans consommable
- résultats immédiats et durables
- rentabilité maximale
- technologie brevetée

caractéristiques techniques	fabriqué en Belgique
Ergonomie	Portable
Nombre de pièces à main	4
Longueur d'onde	600 – 900 nm
Consommation maximale	1600 W
Indice de protection (humidité poussière)	40 IP
Indice de protection électrique	1/38 sec
Débit d'air avec flexible	15 Kpa
Niveau sonore à 1,5m (ISO 11203)	27 dB
Poids net	15 kg
Dimensions	100cm*45cm*50cm

Intensité Infrarouge	Température
0	40°C
2	44°C
4	46°C
6	51°C
8	55°C (risque de rougeur)
10	58°C (risque de brûlure)



Adipologie
des résultats visibles
et durables dès
la première séance

Adipologie

Ultrasons minceur
multi-focalisés LFU

**Procédé unique et breveté,
non invasif et sans risque.**

Seul équipement capable de traiter les altérations esthétiques avec une double action mécanique et athermique qui provoque simultanément la lipolyse des adipocytes et la défibrose des tissus conjonctifs.



**actions :**

- élimine les amas adipeux
- traite tous les types de cellulites
- redessine la silhouette
- traite le relâchement cutané
- aide au rajeunissement du corps

séance :

- durée moyenne des séances : 20 minutes
- durée du traitement : 2 mois (4 à 6 séances espacées de 2 à 3 semaines)

matériel :

- équipement **Adipologie**
- guéridon
- gel conducteur

les + :

- procédé 100% naturel et non-invasif
- technologie unique et brevetée
- action simultanée minceur et raffermissement
- résultats rapides et durables
- sans risque ni effets secondaires
- simplicité d'utilisation

caractéristiques techniques		fabriqué en Espagne
Puissance d'émission des ultrasons	< 1W/cm2	
Fréquence d'émission des ultrasons	< 500khz	
Pièce à main	1	
Puissance d'entrée électrique	78W	
Puissance électrique de sortie	21W	
Puissance acoustique de sortie	9W	
Écran	LCD touchscreen	
Poids	30 kg	
Dimensions	50 x 43 x 134 cm	
Tension	110/230 V ; 50Hz/60Hz	

Adipologie

traite les fibroses
et les inflammations



Cryocell

cryolipolyse

Technique d'amincissement permettant d'évacuer les adipocytes par le froid.

Elle permet une réduction non invasive des amas de graisse localisés, dans le but de redessiner la silhouette.



actions :

- Réduction des bourrelets graisseux localisés sur 9 zones : les hanches, les bras, l'abdomen, les cuisses, le pli sous-fessier ou encore les genoux par l'évacuation progressive des adipocytes.
- La cryolipolyse apporte également un effet tenseur et une perte de volume.

séance :

- Traitement de 1 à 3 séances espacées de 30 jours selon le volume de la zone traitée.
- Chaque séance dure entre **45 min** et **1 h**.

matériel :

- équipement **Cryocell**
- pince à pli
- membranes de protection
- filtres

les + :

- appareil minceur mains libres
- méthode de lipolyse naturelle et non invasive
- possibilité de traiter 2 zones corporelles en simultané
- interface ergonomique
- mode fusion

Cryocell
une technologie
à la pointe
de l'innovation

caractéristiques techniques

| fabriqué en Asie

Ergonomique	Sur roulettes
Nombre de pièces à main	4
Température Minimum	Jusqu'à -7°
Température Maximum	+42°
Taille Pièces à mains grand format	168 x 78 mm
Taille Pièces à mains petit format	108 x 58 mm
Refroidissement	Air, eau réfrigérée et semi-conducteur Peltier
Système de récupération des fluides	Oui
Option Chaud / Froid	Oui
Système auto-nettoyant	Oui
Capacité réservoir d'eau	4,5 L
Puissance générateur	1500 W
Poids	45 kg
Dimensions	118cm*49cm*56cm



Esthe-Shape

électrostimulation (EMS) + Radiofréquence



L'électrostimulation (EMS) consiste à provoquer des contractions musculaires localisées. Cette activité intensive renforce et densifie les fibres musculaires, favorise la consommation des graisses et facilite leur élimination. La radiofréquence apporte deux actions complémentaires. Elle favorise la dégradation des graisses en acides gras qui pourront être « consommés » par les muscles durant la séance. Elle exerce une action de raffermissement cutané très appréciée pour le remodelage de la silhouette.



actions :

- remodelage de la silhouette
- body Shaping
- body Sculpting
- renforcement musculaire
- amélioration de la circulation veineuse et lymphatique
- perte de volume
- fermeté des tissus

séance :

- Traitement en 4 à 8 séances espacées de quelques jours.
- Une séance dure 30 minutes (et génère de 20 000 à 30 000 contractions musculaires).

matériel :

- équipement **Esthe-Shape**
- sangles de maintien

les + :

- appareil minceur mains libres
- sans consommable
- résultats rapides et durables
- interface ergonomique
- méthode non invasive et sans risque
- remodelage corporel sans chirurgie


Esthe-Shape

un traitement
mains libres
haut de gamme

caractéristiques techniques

| fabriqué en Asie

Ergonomie	Sur roulettes
Nombre de pièces à main	2 x 2
Energie (Tesla)	10 Tesla en pic
Durée de pulse	250 us
Programmes de travail	5
Refroidissement générateur	Air réfrigéré
Refroidissement pièces à main	Air réfrigéré
Puissance générateur	2000W
Poids	90kg
Fréquence RF	4-5 mhz
Dimensions	115 x 65 x 70 cm

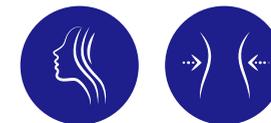

I-press

pressothérapie

Soins minceur et bien-être grâce au principe de presso-esthétique.

La presso-esthétique est un soin qui permet d'accélérer et d'améliorer la circulation lymphatique.

Reproduit le massage lymphatique pour activer le retour de la circulation sanguine.



actions :

- stimulation de la circulation du sang et de la lymphe
- stimulation du système immunitaire
- élimination des toxines
- déstockage des excès de graisse et d'eau
- raffermissement des tissus
- relaxation

effets :

- sensation immédiate de détente profonde et de bien-être
- amélioration de l'aspect de la peau
- affinement de la silhouette

séance :

- Les séances de pressothérapie peuvent être réalisées lors d'un parcours minceur ou des soins bien-être.
- Une séance permet de ressentir les effets physiologiques attendus (augmentation du flux veineux et lymphatique, diminution de la sensation de jambes lourdes, élimination des déchets et des toxines etc...).

les + :

- technologie simplifiée
- pressothérapie séquentielle et progressive
- ciblage précis & intensité modulable
- interface de programmation précise et intuitive
- packs clés en mains adaptés à vos besoins

caractéristiques techniques

| fabriqué en France

	I-press 4C	I-press 6C	I-press 10C
Bottes	4 cellules	6 cellules	10 cellules
Manchons	4 cellules	5 cellules	7 cellules
Ceinture	4 cellules	5 cellules	5 cellules
Hanchières	-	-	En option
Interface utilisation	Android Bluetooth	Android Bluetooth	Option écran tactile sur l'appareil
Créer des programmes	-	Oui	Oui
Ciblage de zone de traitement	-	Oui	Oui
Recouvrement de cellules	-	-	Oui
Dimensions (LxlxH)	34 x 32 x 14 cm		
Poids	4.9kg		
Alimentation	230 VAC/ 50 Hz		
Puissance	50 VA		
Dépression	Jusqu'à 135 mbar		



DP Skin

votre partenaire
scientifique

DP Skin

diagnostic de peau
et diagnostic capillaire

L'appareil de diagnostic constitue une parfaite introduction pour votre offre de soins.

Avec 15 critères d'analyse de peau et 4 critères d'analyse des cheveux et du cuir chevelu, la dernière version de l'analyseur **DP Skin** apporte une véritable caution scientifique à vos recommandations et aux soins beauté, anti-âge ou capillaires que vous proposez.



4 modes d'analyse :

- diagnostic complet
- diagnostic flash visage
- diagnostic flash capillaire
- diagnostic approfondi de l'hydratation

actions :

- analyse et diagnostic la condition de la peau (hydratation, pores, kératine, rides...)
- recommande des produits et traitements en fonction des résultats (multi-marques)
- renforce la fidélité de vos client(e)s envers votre institut
- compare les résultats et les images pour valider l'évolution

séance :

- 1 prise de photos : mesures précises avec une technologie 2D & 3D brevetée
- 2 analyse automatique : interprétation instantanée du niveau de sévérité du critère observé
- 3 édition du bilan de soins : programme de soins recommandés et personnalisés en fonction du type de peau & cheveux

matériel :

- un dermoscope (appareil **DP Skin**)
- un ordinateur
- une sonde d'hydratation
- patches sébum et Dsquam pour l'analyse

les + :

- 1 caméra haute définition équipée de 16 LEDs
- analyse 19 critères : 15 critères d'analyse de peau + 4 critères d'analyse des cheveux et du cuir chevelu
- diagnostic 2D et 3D breveté
- une interface simple, ergonomique, sans abonnement et mobilisant l'intelligence artificielle pour la définition des recommandations
- interface personnalisable : possibilité d'intégrer votre propre cosmétique

caractéristiques techniques		fabriqué en France
Technologie de prise d'image	CMOS	
Format image export documents	jpeg	
Dispositif de prise d'image	1/1.8"	
Alimentation	USB 3.0 (5V, 2000mA)	
Résolution	4000*3000 pixels	
Type d'éclairage	DEL de groupe 0 (16 LEDs)	
Technologie d'éclairage	rétrodiffusé sans brillance (brevet)	
Nombre de pixels	12Mpix	
Objectif	Grossissement : x60 / Focale : 25 mm	
Temps d'acquisition	1 seconde	
Nez de contact	Poids (avec le nez standard) : 410 grammes	
Surface d'examen	19 x 15 mm ²	
Plus petite structure visible	10 μm	
Format de l'image archivage et visualisation	DICOM	



Biody Coach

analyse de
composition corporelle

Biody Coach
le booster de ventes
de cures minceur

L'analyseur de composition corporelle Biody Coach utilise la bio-impédancemétrie pour mesurer les masses corporelles :

masse musculaire, masse osseuse, masse hydrique, masse grasseuse et masse squelettique. L'intelligence artificielle permet alors d'établir un diagnostic personnalisé ultra fiable et précis en confrontant les données récoltées à celles du logiciel *Biody Manager*.



actions :

- analyse et diagnostic des composantes corporelles
- mesure 5 paramètres : hydratation hors graisse, équilibre hydrique, IMC, masse grasse, masse musculaire, squelette
- l'appareil délivre un courant de faible intensité à partir d'électrodes émettrices et recueille la résistance des tissus au passage du courant jusqu'aux électrodes réceptrices.

séance :

- 1 entrer les informations relatives à votre client(e) (âge, taille, poids etc...)
- 2 placer le **Biody Coach** au niveau de la cheville pour capturer la mesure
- 3 édition du bilan de soins en instantané sur le logiciel *Biody Manager*
- 4 analyse et suivi des résultats

matériel :

- un impédancemètre portable, précis, rapide et connecté
- une tablette équipée du logiciel *Biody Manager* en accès illimité pour consulter les résultats

les + :

- équipement High Tech fabriqué en France
- analyseur miniaturisé et connecté
- diagnostic de très haute précision fiabilité maximale
- tableau de bord personnalisé pour chaque client
- possibilité de sélectionner les indicateurs pertinents pour chaque traitement
- gain en légitimité et fiabilité pour booster ses ventes de cures
- gestion d'un portefeuille client
- historique détaillé par indicateur et en synthèse
- agenda professionnel
- envoi des synthèses par email

caractéristiques techniques

| fabriqué en France

Mesure quadripolaire pied/main

Circuit multicouche

Batterie NiMh rechargeable de 9V

Recharge batterie par câble USB

Mesure sur 5 fréquences de 5 à 200kHz

Transfert Bluetooth des mesures aux 5 fréquences et de la phase

Plage de mesures : 20 à 1 500 Ohms

Intensité du courant : 800 µA crête

Précision : impédances 1% - angle de phase : +/- 0.5°

Poids : 300g

Connexion par Bluetooth via PC / mobile

Plateforme d'interprétation des données via internet



Adicell

Thermographie de contact

La thermographie de contact permet la détection et l'analyse de la cellulite et des adiposités localisées en simultané.

Adicell
Pour un bilan corporel précis



actions :

- analyse et diagnostic du type de cellulite
- analyse et diagnostic des adiposités localisées
- renforcer la fidélité de vos client(s) envers votre institut
- comparer les images pour valider l'évolution

séance :

- prise de mesure réalisée lors de la phase de diagnostic pour déterminer le type de cellulite et la zone de traitement.
- l'opération peut être reproduite au cours du protocole et en fonction de ce dernier pour constater les résultats.

matériel :

- 4 plaques thermographiques
- 1 outil de sélection Ideal *ThermoPlate Selector*
- 1 boîte de rangement compacte
- application *Adicell Thermo*
- cartes de diagnostic pour un enregistrement manuel des résultats

les + :

- identifier le type de cellulite
- identifier le type d'adiposité
- mettre en place des traitements anti-cellulite efficaces et ciblés
- proposer des protocoles préventifs
- suivre l'évolution des traitements

caractéristiques techniques

| fabriqué en Italie

Dimensions	34 x 23 x 25
Poids	3.80kg
nombre de plaques	4
entretien	très simple
conservation	à l'abri du soleil



DP Hair

diagnostic capillaire



DP Hair

La nouvelle génération
du diagnostic capillaire

L'appareil de diagnostic constitue une parfaite introduction pour votre offre de soins.

Avec 6 critères d'analyse des cheveux et du cuir chevelu : type de chute, type de cuir chevelu, densité capillaire, sensibilité, cellules mortes (pellicules), épaisseur des cheveux.

DP Hair apporte une véritable caution scientifique à vos recommandations et aux soins capillaires que vous proposez.



actions :

- analyse et diagnostique la condition des cheveux et du cuir chevelu
- renforce la fidélité de vos client(e)s envers votre établissement
- compare les résultats et les images pour valider l'évolution
- envoie les résultats aux client(e)s par mail

séance :

- 1 prise de photos : mesures précises avec la technologie DP Hair
- 2 analyse automatique : interprétation instantanée du niveau de sévérité du critère observé
- 3 édition du bilan de soins : analyse de chaque critère, synthèse envoyable par email

matériel :

- un combiné optique
- une tablette équipée du logiciel *Dermo Bella* en accès illimité pour consulter les résultats
- chiffon de nettoyage & câble USB

les + :

- 1 caméra HD
- analyse 6 critères
- équipement compact et transportable
- une interface simple, ergonomique, sans abonnement
- gain en fiabilité et en légitimité pour la recommandation des soins

caractéristiques techniques

| fabriqué en France

Alimentation	Entrée : 100-240-V / sortie : 12 V
Agrandissement 2A	Cheveux 50X
Batterie	Batterie au lithium-polymère 5200mAh
Taille produit	440 x 190 x 175 mm bobbine 19x21x10 cm
Poids produit	2kg (combiné inclus)
Résultat d'analyse	Indice de résultats par mesure (0-99)
Mesure	Etat cuir chevelu, peau morte, sensibilité, épaisseur, densité, Etat cheveux



HairLED

Photobiomodulation

Les effets positifs de la Photobiomodulation permettent une régénération capillaire, une augmentation de la vascularisation des bulbes pileux, une diminution de la sécrétion de sébum et la stimulation de la repousse de cheveux sains.



actions :

- propose plus d'une vingtaine de protocoles précis pour le traitement des cheveux, du cuir chevelu mais aussi du visage.

matériel :

- équipement **HairLED** fabriqué en France avec une vingtaine de protocoles pré-enregistrés
- lunettes de protection oculaire

les + :

- soins mains libre
- sans consommable
- interface ergonomique
- méthode naturelle et non invasive
- utilisable pour les soins visages
- soins rapides, confortables et sécurisés.

séance :

- Un traitement **HairLED** dure entre 1 et 10 séances espacées de quelques jours selon les applications.
- La séance dure entre 8 et 20 minutes.

caractéristiques techniques

| fabriqué en France

Ergonomie	Sur roulettes
Tablette d'utilisation	18cm * 28cm
Nombre de panneaux	3
Surface d'illumination	1000 cm ²
Nombre de LEDs	480
Densité de puissance	125 mW / cm ² à 10 cm
Fluence	156 Joules
Nombre de couleurs	8
Longueur d'onde max	940nm
Poids	40 kg
Dimensions	130cm*50cm*40cm
Puissance consommée	De 90 à 250 V / de 300 à 600 W

HairLED

L'avenir du soin capillaire
dès aujourd'hui



BodyLED

Photobiomodulation

BodyLED
l'excellence &
la polyvalence de la PBM
à votre service

La Photobiomodulation est un procédé physiologique de régénération cellulaire.

Les effets positifs de la Photobiomodulation par LED sont multiples : stimulation du métabolisme cellulaire, activation des fibroblastes pour relancer la production de collagène et d'élastine, oxygénation tissulaire, renforcement de l'immunité de la peau et détoxification, traitement de l'inflammation, de la douleur, énergisation, qualité du sommeil...



actions :

- double configuration : esthétique et spa + kinésithérapie et physiologie.
- récupération sportive
- anti-âge
- anti-imperfection
- tonification et raffermissement
- gestion du stress et relaxation.

séance :

- Traitement en 4 à 8 séances espacées de quelques jours.
- Une séance dure de 8 à 36 minutes.

matériel :

- équipement **BodyLED** fabriqué en France
- Lunette de protection oculaire

les + :

- appareil professionnel mains libres
- méthode naturelle et non invasive
- soins sans consommable
- utilisable pour les soins visage & corps, innocuité totale
- interface ergonomique

caractéristiques techniques

| fabriqué en France

Tablette d'utilisation	22 X 15
Nombre de panneaux	10
Surface d'illumination	10 panneaux articulés de 180 x 380mm 684 cm ²
Nombre de LEDs	1600
Irradiance	100mW/cm ² à 10cm
Fluence	156 Joules /cm ²
Nombre de couleurs	5 (rouge, jaune, IR1, IR2, bleu)
Longueur d'onde max	855nm
Poids	180kg (avec table)
Dimensions	265 x 80 x 180 cm
Modes	Continu, pulsé
Consommation	200 W
Durée de vie des diodes	30 ans

SAV, formation à l'utilisation de nos appareils, mise à disposition d'outils marketing et de communication ou encore aide au financement et assurance.

Corpoderm,
c'est une offre globale !

le service après vente, l'assurance de la tranquillité



l'assistance inclut

- un service technique en ligne directe du lundi au vendredi de 9h à 17h
- la mise à disposition d'un appareil en cas d'intervention en atelier (sur devis)

en extras


- extensions de garantie disponibles jusqu'à 48 mois
- contrats de maintenance

l'exemple par l'image





Biody Coach

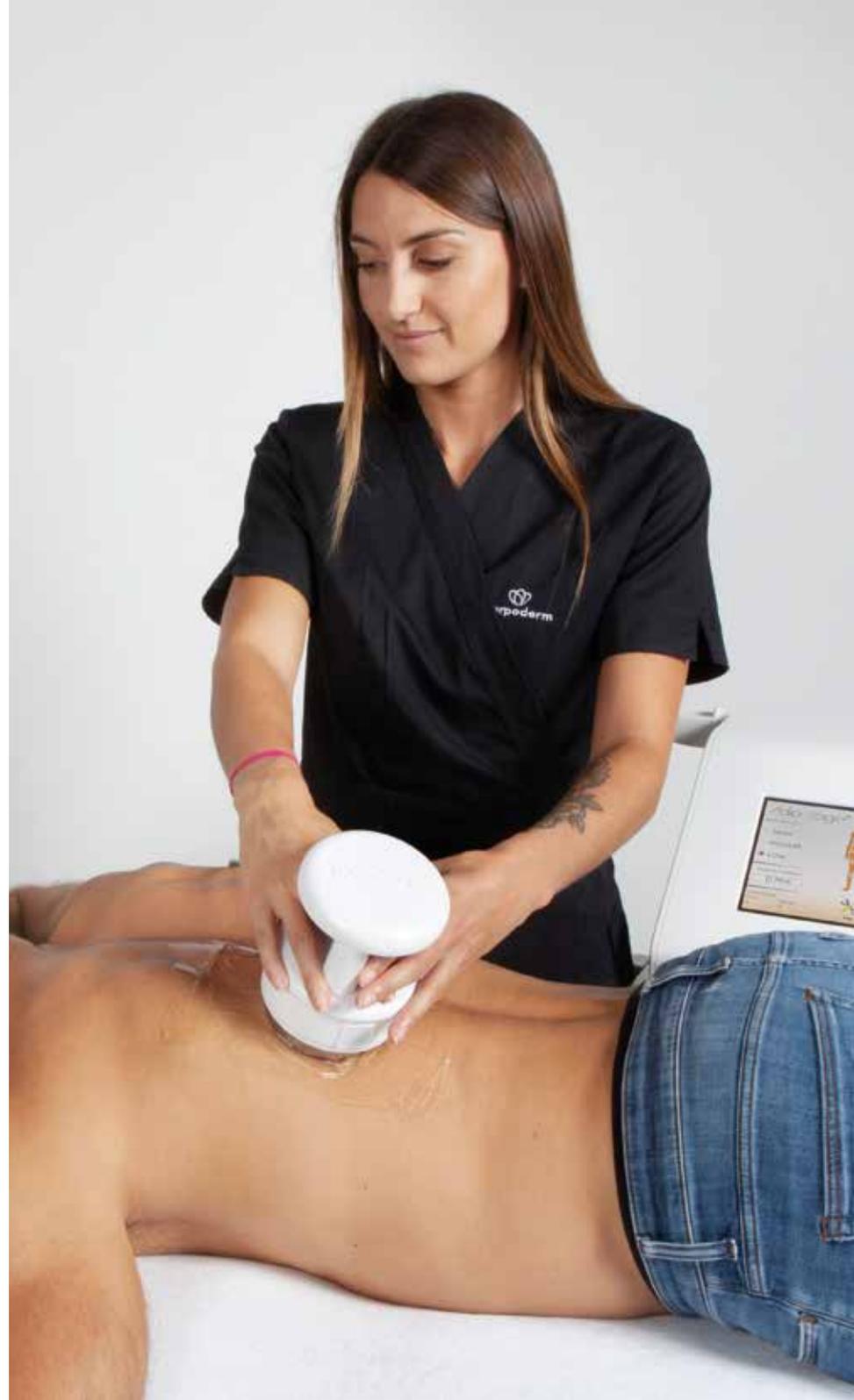

Adipologie



Esthe-Shape



Cryocell





EsthéLED



Adicell



Stella



Stella



Leaseir



Leaseir




BodyLED



DP Hair



HairLED

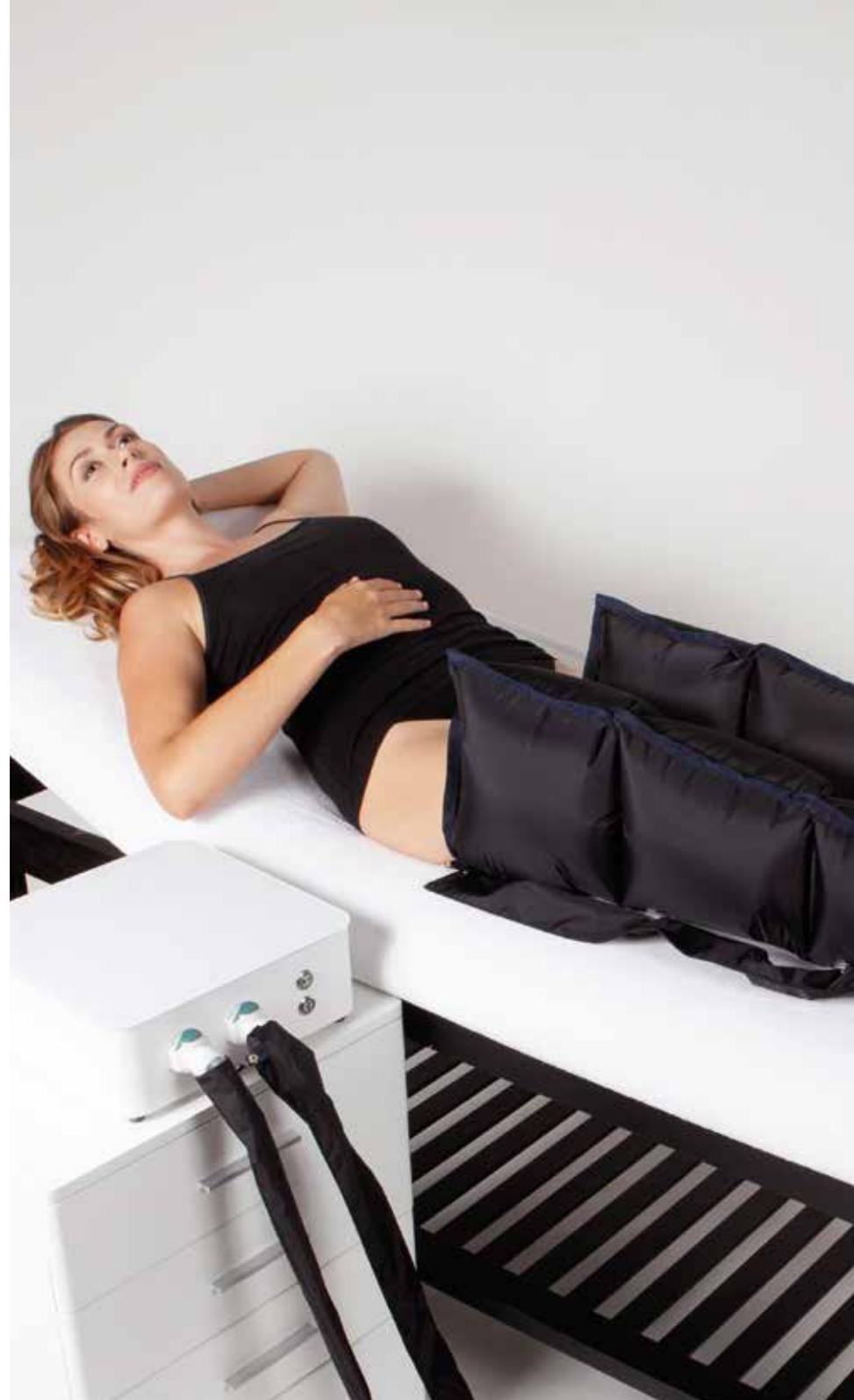


I-press



Esthe-Skin

112

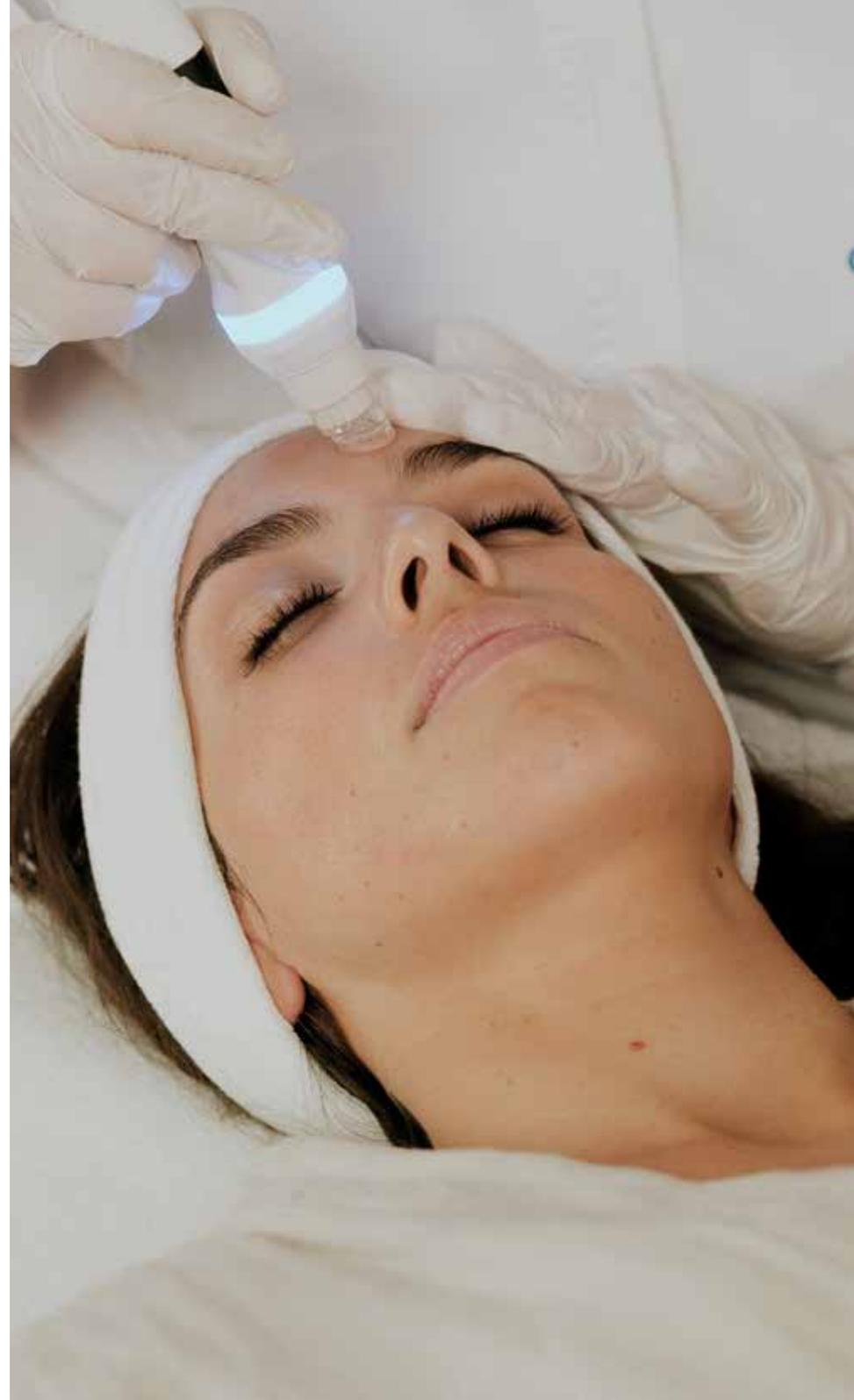

Esthe-Skin

113



MelanColor

114

Directeur de la publication :
Julien Flotats

Rédaction & supervision :
Pauline Wyrowicz

Photographies :
Christô photographe, Tien Tran, Sophie Gisclard,
Agence YE

Design Graphique :
Grégoire Edon (kollebolle.com)

Impression :
Imprimerie Trèfle (www.imprimerie-trefle.fr)





merci.